


veit smile waterjet

Irrigador Oral de Mesa Manual de instruções RST5105

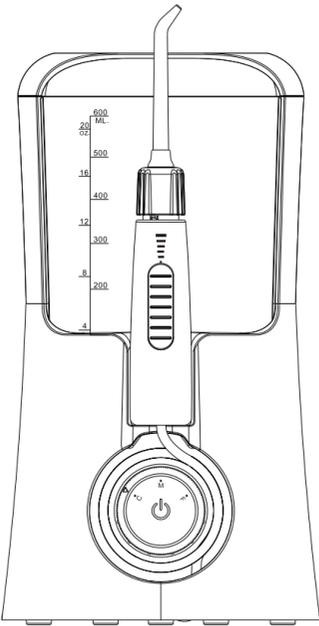

Acompanha: Irrigador oral (1 unidade), bicos padrão (4 unidades), limpador de língua (1 unidade), bico ortodôntico (1 unidade), bico subgingival (1 unidade), fonte com tensão de entrada 100-240V e saída 12V, 50/60 Hz, IPX4, Classe II, 1,5A (1 unidade) e manual de instruções (1 unidade)

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia as instruções de segurança antes de utilizar este produto. Essas informações auxiliarão no uso correto do produto, além de evitar que o usuário ou outras pessoas sofram qualquer tipo de dano físico.

Sempre siga as precauções de segurança ao utilizar aparelhos elétricos, especialmente na presença de crianças.

ATENÇÃO – CUIDADO

- Não permita que este aparelho seja utilizado ou manuseado por crianças pequenas ou bebês.
- Mantenha o equipamento fora do alcance de crianças.
- Não utilize o aparelho se houver qualquer dano no cabo de alimentação ou no plugue.
- Sempre remova o plugue da tomada após a utilização.
- Não toque no plugue com as mãos molhadas.
- Não coloque o dispositivo na água ou em outros líquidos.
- Não coloque o dispositivo em locais onde esteja sujeito a quedas no chão, na banheira ou no lavatório.
- Não utilize o dispositivo durante o banho.
- Não toque no produto se ele cair na água. Remova o plugue da tomada imediatamente.

ALERTAS


- O procedimento de limpeza não deve ser executado por crianças menores de 8 anos, pessoas com faculdades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento sobre este procedimento.
- O usuário deve realizar a limpeza somente após leitura de todos os procedimentos, quando estiver ciente de todos os riscos envolvidos.
- Não permita que crianças brinquem com o aparelho.
- O aparelho deve ser utilizado somente com a unidade de alimentação que o acompanha.
- Mantenha o dispositivo longe de superfícies aquecidas.
- Não use outros bicos além daqueles recomendados.
- Não use o dispositivo se perder os bicos.
- Mantenha os bicos longe de crianças pequenas. Essas peças são pequenas o suficiente para serem engolidas e podem ficar presas na garganta da criança.
- Não aplique o jato d'água debaixo da língua, dentro do ouvido, nariz ou em outras áreas delicadas.
- Não utilize para outra finalidade que não seja sua higiene oral.
- Não abasteça o tanque com água quente em temperatura acima de 40° C
- Determinados tipos de enxaguante bucal podem danificar o dispositivo, resultando em trincas no tanque de água.
- Portanto, em nenhuma hipótese utilize enxaguantes bucais no tanque de água, isto pode danificar o seu produto. Encha o tanque somente com água pura.
- Usuários com dor de dente ou gengiva talvez não tenham condições de utilizar esse dispositivo e devem consultar o dentista.
- Não pressione o bico com muita força contra seus dentes ou gengivas, pois isso pode causar lesões gengivais.
- Use somente em ambiente doméstico, nunca em locais externos.

GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES

-1-


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

Irrigador oral

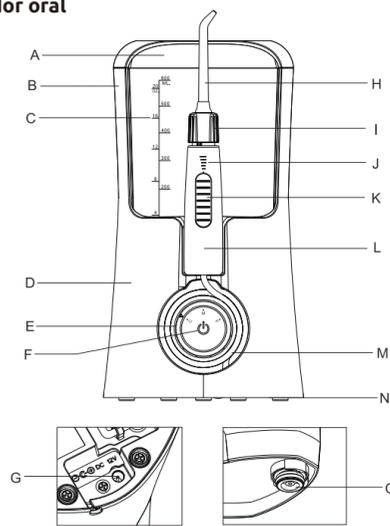

- A: Tampa do tanque de água
B: Tanque de água
C: Indicador de volume
D: Unidade de base
E: Indicador de modo
F: Interruptor multifuncional (pressione para ligar ou desligar e gire para selecionar o modo desejado)
G: Conector de alimentação
H: Bico
I: Botão do bico
J: Indicador de pressão
K: Interruptor de pausa
L: Cabo
M: Mangueira
N: Base da unidade
O: Válvula do tanque

Acessórios

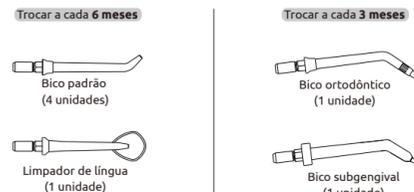

-2-

INSTRUÇÕES DE USO

Guia de introdução

Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana sem quaisquer objetos pontiagudos por perto e certifique-se de que o cabo de alimentação esteja seco e sem quaisquer danos. O dispositivo é alimentado por um adaptador especial com um conector de alimentação. Fonte com tensão de entrada 100-240V e saída 12V, 50/60 Hz, IPX4, Classe II, 1,5A (1 unidade) e manual de instruções (1 unidade)

1. Insira o plugue no conector de alimentação na base da unidade e conecte o cabo do adaptador a uma tomada elétrica. (Fig. 1).
2. Remova a tampa do tanque de água.
3. Remova o tanque de água para enchê-lo com o líquido adequado, desde que sua temperatura não exceda 40° C e, em seguida, recoloca-o sobre a unidade principal pressionando-o para baixo firmemente. (Fig. 2-1 e Fig. 2-2)

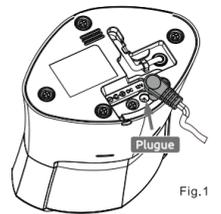


Fig.2-1

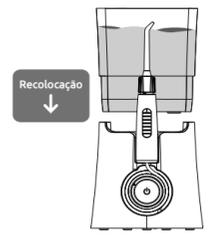


Fig.2-2

Inserção e remoção de bicos

Inserção do bico

Pressione o botão para baixo. Em seguida, insira o bico no centro do cabo e, após o encaixe, puxe levemente o bico para fora a fim de verificar se está bem encaixado. (Fig. 3)

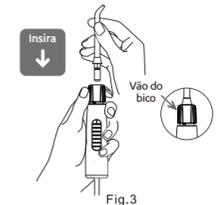


Fig.3

Remoção do bico

Pressione o botão de liberação na extremidade superior do cabo e, em seguida, puxe levemente o bico para fora utilizando sua mão. (Fig.4)

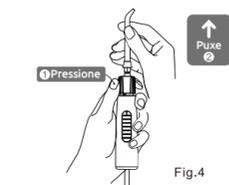


Fig.4

- 3 -

Como usar o irrigador oral

Observação:

Não ligue o dispositivo antes de colocar o bico em sua boca. Na primeira utilização, sugerimos selecionar o menor nível de pressão, aumentando-a gradualmente até chegar à configuração desejada.

1. Segure o cabo e aponte o bico para o lavatório. Em seguida, pressione o botão seletor multifuncional para ligar o dispositivo. (Fig. 6)
2. Gire o botão seletor multifuncional até selecionar o modo desejado. Em seguida, pressione o botão do bico para ajustar a pressão da água. (Fig. 7-1 e 7-2)

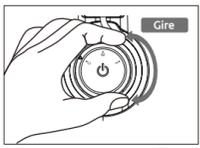


Fig.7-1

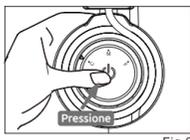


Fig.7-2

3. Ajuste a direção do bico girando o botão correspondente a ele.
4. Curve-se na direção do lavatório e coloque o bico em sua boca. Em seguida, pressione o botão de pausa até "1" para iniciar a irrigação (feche sua boca levemente para evitar que a água respingue). (Fig. 8)
5. Posicione o jato d'água em um ângulo de 90 graus em relação ao dente e à gengiva. (Fig. 9)

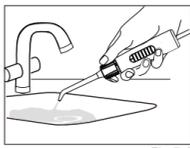


Fig.8



Fig.9

6. O aparelho possui 3 modos de funcionamento diferentes: modo limpeza, modo massagem e modo hálito fresco.
7. Para utilizar o modo limpeza, gire o botão até a posição "C". No modo limpeza, o fluxo de água será brevemente pausado após 30 segundos para lembrar que você deve limpar sua outra arcada dentária. Uma nova pausa breve após 1 minuto indicará o encerramento do tempo de utilização. A unidade continuará funcionando até que o ciclo de 3 minutos seja encerrado ou até que você o desligue. (Fig. 10)
8. Se você girar o botão seletor até a posição "M", o modo massagem realizará uma agradável massagem em seus dentes. A unidade continuará em funcionamento até que o ciclo seja encerrado ou você a desligue. (Fig. 11)

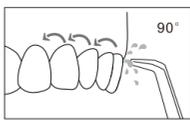


Fig.10

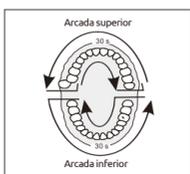


Fig.11

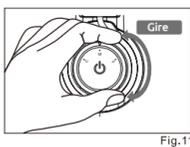


Fig.11

-4-

Como encerrar a utilização do produto

É possível encerrar a irrigação através dos métodos abaixo:

1. O desligamento automático é realizado após o encerramento do ciclo de 3 minutos.
2. Desligue o pressionando o botão seletor multifuncional.
3. Desconecte o adaptador imediatamente em caso de qualquer emergência.

Após o uso

1. Remova o tanque de água e descarte a água contida nele.
2. Empurre o botão deslizador até o indicador da pressão mais elevada e ligue-o para drenar a água de dentro do dispositivo.
3. Desative o dispositivo e seque-o com um pano seco e macio. (Fig. 13)
4. Pressione o botão de liberação e remova o bico. Em seguida, guarde-o no estojo de bicos (Fig. 14)
5. Desconecte o adaptador.

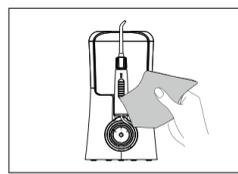


Fig.13

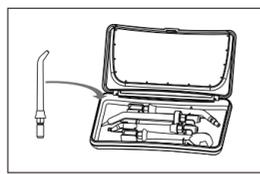


Fig.14

BICO FUNCIONAL

Limpador de língua

Quando desejar limpar sua língua, apoie o raspador de língua suavemente sobre a linha central da superfície dela, aproximadamente na metade de seu comprimento, usando inicialmente a pressão de água mais leve e aumentando-a gradualmente, conforme necessário. (Fig. 15)

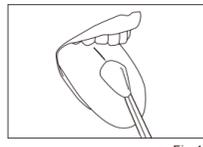


Fig.15

Bico ortodôntico

O bico ortodôntico foi especialmente desenvolvido para pessoas que utilizam aparelho: ele limpará as áreas de difícil alcance ao redor e nas áreas interiores dos aparelhos ortodônticos.

1. Posicione o fluxo de água a 90 graus da superfície do dente e na altura da linha da gengiva. Comece a partir do último molar (dente traseiro).
2. Deslize o bico lentamente ao longo da linha da gengiva e faça breves pausas para utilizar as cerdas da escova para limpar a área entre os dentes e ao redor de toda e extensão do aparelho ortodôntico.
3. Repita até finalizar a limpeza da parte interna e externa de seus dentes. (Fig. 16)

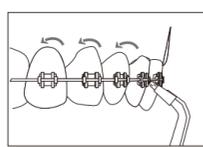


Fig.16

- 5 -

Bico subgingival

O bico subgingival foi especialmente desenvolvido para a limpeza das bolsas periodontais. Para utilizar essa peça, é INDISPENSÁVEL configurar o dispositivo para uso com a configuração de pressão mais baixa.

1. Encoste a ponta macia contra um dente em um ângulo de 45 graus e, cuidadosamente, coloque a ponta abaixo da linha da gengiva. Em seguida, insira-a na bolsa periodontal. (Figura 17)
2. Ligue a unidade e continue contornando a linha da gengiva até que todas as bolsas periodontais sejam tratadas. (Fig. 18)

Observação:

Essa ponta deve ser usada somente com a pressão de água mais baixa para aumentar a vida útil da ponta macia, pois ela é bastante frágil.

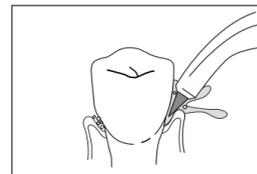


Fig.17

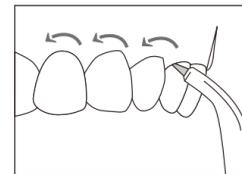


Fig.18

MANUTENÇÃO

Use somente água ou um produto de limpeza neutro para limpar o dispositivo. Nunca utilize agentes cáusticos ou abrasivos (exemplo: vinagre e removedores de incrustações calcárias), já que eles podem danificar o dispositivo. Não lave o equipamento utilizando água quente com temperatura acima de 40° C. Mantenha o dispositivo longe de áreas com alta temperatura e evite luz solar direta.

Unidade principal

1. Remova o tanque de água e faça a drenagem do restante da água do interior do dispositivo.
2. Limpe usando um pano macio com sabonete líquido e seque utilizando um pano seco e macio.
3. Não mergulhe a unidade principal em água para limpá-la.

Cabo

1. Lave com água e seque com um pano macio.
2. Não dobre, puxe ou torça a mangueira de água.

Tanque de água

1. Lave com água e seque com um pano seco e macio.
2. Certifique-se de que o tanque de água esteja na posição correta e firmemente fixado para armazenar água.

Bicos

1. Lave-os com água e seque-os com um pano seco e macio.
2. Troque o bico no compartimento de armazenagem.
3. Troque os bicos a cada 6 meses.

Adaptador de carregamento

Limpe a peça de metal do plugue de alimentação com um pano seco uma vez a cada 6 meses.

- 6 -

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
A unidade não funciona	O motor não está funcionando	Certifique-se de que o adaptador esteja firmemente conectado à tomada e à unidade. Certifique-se de que a alimentação da tomada e da unidade esteja energizada.
A pressão da água está muito baixa	O bico está entupido com sujeira O bico está deformado A válvula do tanque está entupida com sujeira	Limpe ou troque o bico por um novo Troque o bico por um novo Limpe a válvula e encha o tanque com água pura
A água não sai	O tanque está vazio A pressão da água está com a configuração mínima	Encha o tanque Deslize o interruptor para ajustar a pressão
O tanque está vazando	A válvula não está no lugar Não é possível encaixar a válvula	Instale uma nova válvula Remova a válvula e instale-a novamente
Fissura na extremidade do bico subgingival	A ponta do bico está desgastada	Troque o bico por um novo

DESCARTE

Somente desmonte o dispositivo no momento em que o descarte for necessário, pois isso poderá danificá-lo. O aparelho deve ser desconectado da fonte de alimentação para ser desmontado.



ISO9001 & ISO13485 Certificated Manufacturer



Printed in China

- 7 -